

**MEDA**

Mic-Key® – Gastrostomiport Përdorimi dhe përkujdesja


albanska

Mic-Key® Gastrostomiport është një prodhim i thjeshtë, i vogël dhe e efektshme, për të dhënë/marrë ushqim, lëngje dhe ilaçe në një mënyrë të sigurt, me rastin e problemeve të ndryshme të kapërdirjes. Me Mic-Key® mund të jetosh në mënyrë sa më të zakonshme që është e mundur, meqë ai ka një ventil prapa dhe i fiksuar si ballon.

Përdorimi/furnizimi/kohë ngrënie

Për mos ta ndier veten të ligështuar rekomandohet të ulesh/gjysëmulesh. Kij kujdes të jetë ushqimi/ushqimi i temperaturës së dhomës. Lidhja për në dhe nga pajisjet bashkuese të zorrëve të gomës:

Viza e zezë përballë vizës së zezë, shtype brenda, rrotullo një çerek deri në tre çerekë rrotullimi, tek vendi i shkyçjes e rrotullo prapa njësoj dhe e zgjatë ashtu që viza e zezë është përballë vizës së zezë. Shpëlah pajisjen bashkuese të zorrëve të gomës dhe Mic-Key® me 10-20 ml ujë para dhe pas çdo furnizimi. Pajisja bashkuese e zorrëve të gomës është e njëpërdorimshëm/vetëm për një pacient, nëse ky përdoret më shumë herë atëherë është me rëndësi që ky të pastrohet mire, të ruhet në frigorifer dhe të ndërrohet së paku çdo të 2-7 ditë.

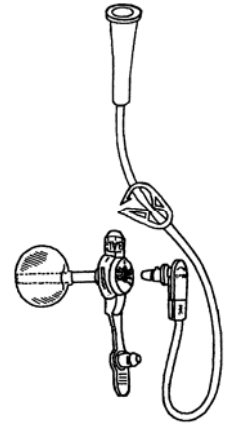

Përkujdesja e përgjithshme

E lanë dhe e thanë rreth stomisë si një pjesë e higjienës së përditshme. Mund të bësh dush, mund të lahesh në banjë, në pishinë etj. Mbaj mirë higjienën e gojës me rastin e përkujdesjes dhe furnizimit, pra asnjë veprim steril.

Përkujdesja për Mic-Key®

Rrotullo Mic-Key® me rastin e larjes së përditshme. Nëse nuk e ke përdorur Mic-Key®, e shpëlanë këtë çdo ditë me ujë. Kontrolllo dhe ndërro ujin në ballon/kufen një herë në javë, p.sh. çdo muaj. Mic-Key® mund të ndërrohet në mjedisin shtëpiak dhe duhet të ndërrohet çdo të dytën deri në çdo të tretin muaj, atëherë do të merr ngjyrë të gabuar dhe ventili prapa mund të jetë i dobësuar.

Nëse Mic-Key® del nga vendi

Merr një të ri dhe fute këtë sa më parë. Nëse nuk ke një Mic-Key® të ri, atëherë e merr të vjetrin, e lanë atë, e futë dhe e fikson atë me ngjitës plagësh ose të ngjashme. Është shumë me rëndësi ta mbash stoamtin hapur – kontakto sa më parë infermierën/mjekun për të dhënë një Mic-Key® të ri.

Në rast shqetësimi e dhembje me rastin e furnizimit/ngrënies, kontakto infermierën/mjekun.

Për informacione të tjera, shih uebfaqen e vet Mic-Key's.

www.mic-key.nu